

MACHINE

3-EN1

AMINCISSANTE ET EMBELLISSEUSE



- Merci d'avoir choisi ce produit
- Veuillez lire le manuel attentivement avant d'utiliser la machine
- Veuillez conserver le manuel pour toute utilisation future
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique et dans un but purement esthétique, l'utilisation de cette machine pour un traitement médical n'est pas recommandée par le fabricant.

TABLE DES MATIERES

- Spécification..... p 0
- Précautions de sécurité p 1
- Avis Important..... p 2
- Nomenclature p 3
- Guide d'utilisation rapide..... p 4
- Instructions pour l'utilisation du mode Ultrasonic....p 5
- Traitement corporel..... p 6
- Instructions pour l'utilisation du mode EMS..... p 8
- Procédure d'utilisation du modèle EMS.....p 9
- Instructions pour l'utilisation de l'infrarouge lointain. .p 11
- Après utilisation..... p 11

Spécification

Puissance de l'adaptateur d'entrée :
AC100-240V
Puissance de l'adaptateur de sortie :
15V, 800mA
Dimensions 190*80*60 mm
Poids : 140g
Fréquence des ultrasons : 1MHz
Annexe : deux paires d'électrodes (4)

PRECAUTIONS DE SECURITE



Attention : Veuillez lire attentivement les instructions avant l'utilisation de votre appareil


Ce produit a été conçu avec un design de précision. Afin d'avoir votre appareil qui fonctionne parfaitement, veuillez lire les informations ci-dessous soigneusement et suivre toutes les instructions. Cela vous aidera à assurer la garantie et à prolonger le cycle de vie de votre produit.

1. Stocker votre produit à l'écart de l'humidité et ne l'utilisez pas sous l'eau. Sinon, les composants électroniques de votre produit pourront court-circuités.
2. Ne pas stocker ce produit près d'une source de chaleur, cela pourrait causer des dysfonctionnements, raccourcir la vie du produit, ou la fonte des composants en plastique.
3. Ne laissez pas tomber le produit ou ne le soumettez pas à des vibrations, cela pourrait causer un dysfonctionnement.
4. N'essayez jamais de démonter le produit vous-même. Tous les composants de l'appareil ne peuvent être entretenus et réparés qu'uniquement par un technicien professionnel.
5. Ne pas utiliser d'autre adaptateur que celui fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un adaptateur extérieur pourrait causer un dysfonctionnement du produit et annulerait la validité de la garantie.
6. Ne pas tirer sur le câble lorsque vous débranchez le produit. Afin d'éviter tout mauvais contact avec l'équipement la meilleure façon est de tenir la prise, et de le débrancher.
7. Rangez tous les fils ensemble proprement. Ne pas enrouler les fils ou les couper cela pourrait provoquer des dommages autres.
8. Les personnes ayant les conditions suivantes doivent éviter d'utiliser ce produit : les patients ayant une tumeur maligne, les femmes au cours de leur grossesse ou de leurs règles, les patients avec une dermatose, les patients avec une maladie non identifiée, les enfants et les aînés.
9. Garder ce produit loin des enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec ce produit car les composants démontés peuvent être avalés accidentellement.

AVIS IMPORTANT

1. Vous pouvez changer le mode en poussant le bouton, vous n'avez pas besoin d'éteindre l'appareil.
2. Peu importe le mode que vous utilisez vous pouvez éteindre directement l'appareil en pressant le bouton « POWER OFF » directement.
3. Pour vérifier que l'appareil fonctionne convenablement vous pouvez utiliser un testeur de tension. Si l'appareil s'avère sous tension, cela ne concerne pas la fonction EMS et Infrarouge.
4. Cet appareil doit être utilisé selon les conditions d'utilisations. Rappelez vous de couper l'appareil, et de le débrancher après toute utilisation.
5. Le temps idéal d'utilisation de l'appareil est de 5 à 15 minutes par mode.
6. L'appareil est intégré d'un dispositif de sécurité. Quand la température devient trop haute, qu'elle soit utilisée ou non, l'appareil baisse automatiquement sa température par sécurité.
7. L'appareil est intégré d'un dispositif de contrôle du temps. Quand votre appareil est en veille, elle s'éteint automatiquement au bout d'un moment. Si vous souhaitez l'utiliser à nouveau, veuillez redémarrer l'appareil.
8. Ne pas utiliser l'appareil plus de 30 minutes.
9. ne pas utiliser l'appareil sans avoir appliqué le produit de soin sur votre peau en amont.
10. Evitez d'utiliser l'appareil trop longtemps sur une même partie de votre corps. Faites des mouvements régulièrement pour éviter un effet de concentration. Cela pourrait causer des démangeaisons ou brûler votre peau.
11. Quand vous utilisez l'appareil, posez la partie en métal bien contre votre peau. Un contact trop distant pourrait réduire l'efficacité de l'appareil. Cela pourrait causer une surchauffe, et des effets non désirés. (Démangeaisons, brûlures)
12. Quand vous avez terminé d'utiliser l'appareil, veuillez nettoyer la tête de l'appareil avec une serviette humide pour éviter toute égratignure.
13. Ne pas utiliser de produits chimiques, ou des nettoyants non appropriés sur votre appareil. Cela pourrait créer un dysfonctionnement ou raccourcir la vie de votre appareil.
14. Si vous avez des questions sur la manipulation de l'appareil, ou que vous ressentez un sentiment d'inconfort après utilisation, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser l'appareil et contacter votre revendeur.
15. Si vous avez un appareil qui ne fonctionne pas, veuillez retourner l'appareil à votre revendeur. Il vous aidera à résoudre les problèmes.

NOMENCLATURE

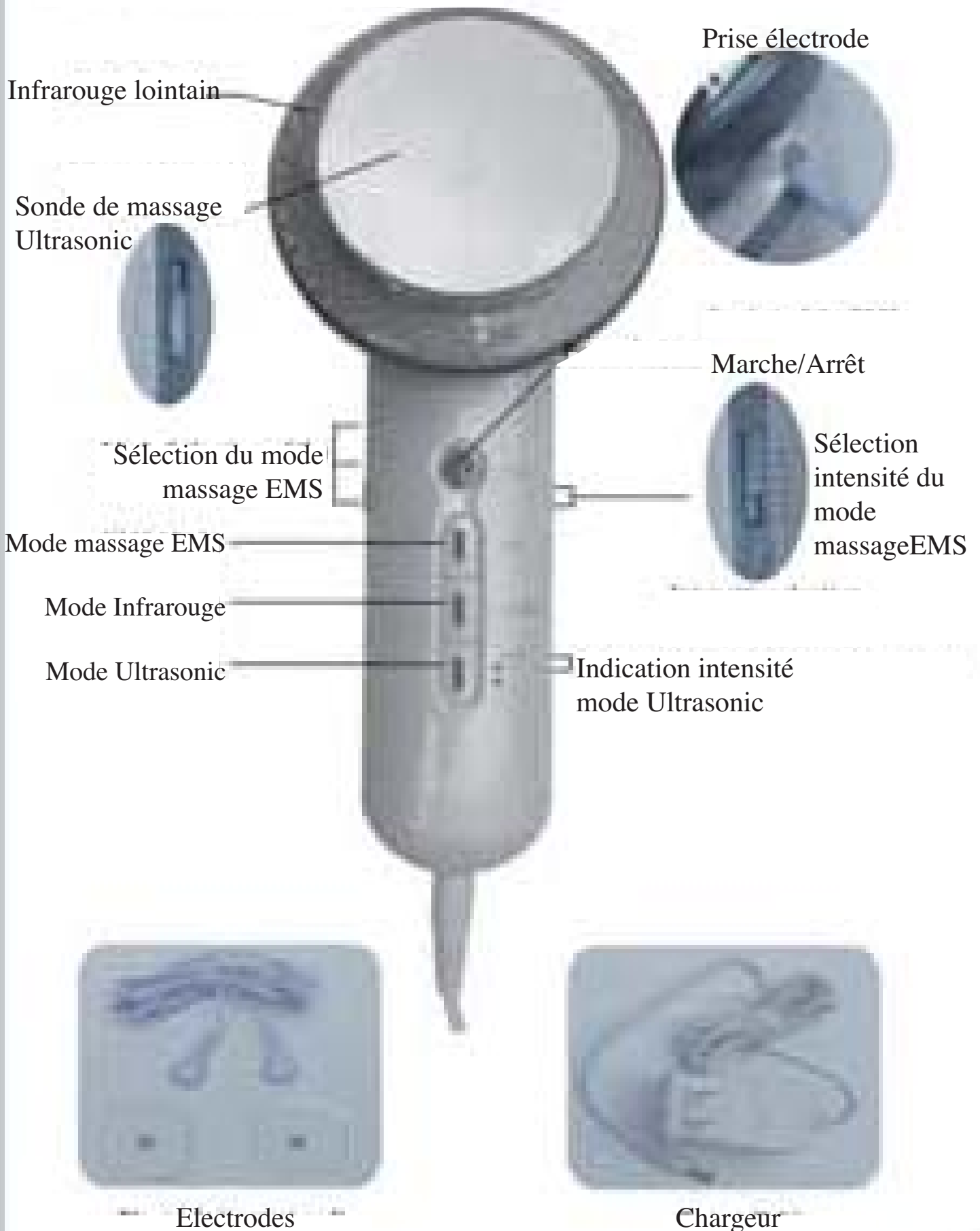

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

Les caractéristiques de la machine 3 en 1 beauté et minceur vous apportent un effet encore plus important ! La machine vous permet de façonner votre corps et de rétablir la résilience de votre peau en peu de temps.

EMS + Infrarouge + Ultrasons >>> Effets Multipliés

Instructions pour affiner votre corps :

Etape 1 :

Nettoyer votre peau avant toute application

Etape 2 :

Utilisez l'EMS pendant 15-20 minutes sur les parties de votre corps qui ont besoin d'être affinées. Il est préférable de le faire sur les points d'acuponctures.

Etape 3 :

Appliquez le produit uniformément sur la peau. (Il est préférable d'appliquer le produit au fur et à mesure sur les différentes parties pour éviter un séchage à l'air, ou une absorption du produit trop tôt par la peau. Cela réduirait les effets).

Etape 4 :

Massez votre peau avec l'onde à ultrasons et l'infrarouge lointain jusqu'à ce que le produit de modelage corporel soit totalement absorbé (pour plus de détails veuillez vous référer aux instructions). Cette étape favorise l'absorption du produit de modelage, stimule la circulation du sang, et retend votre peau !

L'onde à ultrasons et l'infrarouge lointain provoquent une sensation de chaleur sur votre peau. Cette sensation est normale, vous pouvez utiliser ces fonctions avec aisance. (La machine baissera la température automatiquement lorsqu'elle atteindra la limite).

UTILISATION DU MODE ULTRASONIQUE

Avant l'application, il est crucial de choisir un produit approprié à votre peau. Il est non seulement considéré comme un moyen de conduction, mais aussi comme un élément important qui offre à votre peau la nutrition dont il a besoin. Par conséquent, il est toujours obligatoire d'appliquer le produit de soin de la peau avant d'utiliser ce mode.

Etape 1 :


Nettoyez votre peau avant toute application.

Etape 2 :

Appliquez le produit uniformément sur la peau. (Il est préférable d'appliquer le produit au fur et à mesure sur les différentes parties pour éviter un séchage à l'air, ou une absorption du produit trop tôt par la peau. Cela réduirait les effets).

Etape 3 :

Branchez l'appareil Minceur et Beauté.

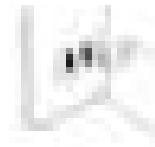


Etape 4 :

Allumez l'appareil (Bouton POWER) et la lumière rouge s'allumera.



Etape 5 :

Appuyez sur le bouton SONIC une fois pour une basse intensité (LOW), deux fois pour une haute intensité (HIGH). Utilisez la basse intensité pour le visage et la haute intensité pour les parties du corps, telles que les bras, les jambes, etc.

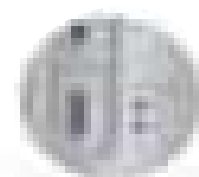

Etape 6 :

Appliquez le produit de soin de la peau sur les parties du corps où vous souhaitez faire le massage. N'oubliez pas de garder votre hydratée. (Remarque : Les produits de soins de la peau en gel sont recommandés, leur efficacité est meilleure).

Etape 7 : Pour commencez le massage, réferez vous aux détails de la page suivante.

Rappel :

Evitez le contact avec les articulations osseuses comme le genoux.

Traitement du corps:

Les instructions suivantes concernent l'utilisation générale de l'appareil.

1. MASSAGE DES BRAS



- Baissez vos mains et relâchez vos muscles. Commencez par le poignet et remontez jusqu'à l'aisselle, pratiquez des mouvements de massage de bas en haut sur la zone à la fois intérieure et extérieure du bras.

- Utilisez la même méthode pour masser votre peau en mouvements circulaires.

2. MASSAGE DES HANCHES



- Just en dessous de l'estomac, faites des tours dans le sens des aiguilles d'une montre pour pousser la peau sur la zone gastrique, et de l'avant vers le nombril




- Pour la peau à l'arrière, faites des mouvements de l'avant vers le centre et de l'arrière vers l'avant.



- Utilisez la même méthode de massage.

3. MASSAGE DES DES FESSIERS

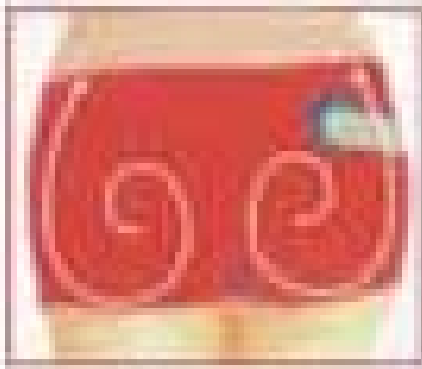

- A partir du centre de la fesse, massez d'un mouvement circulaire



- A partir de la fin du coccyx poussez la peau des fesses en remontant jusqu'à la taille.



- A partir du haut de la fesse, faites un mouvement circulaire en poussant la peau vers le haut et l'extérieur.

4. MASSAGE DES JAMBES/PIEDS



- Partez de la cheville en remontant jusqu'à la cuisse en remontant la peau.




- Utilisez vos deux mains pour masser votre jambe de bas en haut avec des mouvements circulaires.




- Poussez la peau des cuisses de l'intérieur vers l'extérieur puis inversement, en faisant le tour de celles-ci.

UTILISATION DU MODE EMS

- 1) Nettoyez les parties de votre corps qui vont être massées, enlevez le maquillage avec une serviette humide.
- 2) Branchez le fil de fixation sur une tranche de l'électrode. Mettez les pôles « positif » et « négatif » des électrodes sur les différentes parties du corps lors de l'utilisation (toutes deux sont utilisées à un moment donné).

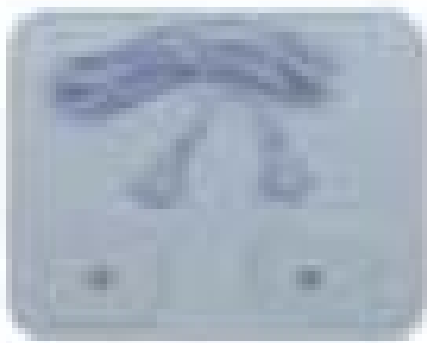


- 3) Placez les électrodes autocollantes sur les parties à traiter. Si les tranches d'électrodes ne sont pas suffisantes, faites-le en plusieurs fois.
- 4) Réglez le bouton d'intensité sur la première position (réglage le plus bas).
- 5) Connectez le fil au dispositif en utilisant le bouchon.
- 6) Allumez l'appareil (la lumière rouge apparaît).
- 7) Choisissez le mode du massage :
Percussion/Massage/Malaxer/Grattage/Amincissement
- 8) Appuyez sur le bouton EMS
- 9) Ajustez l'intensité en fonction de votre confort (5 réglages).
- 10) L'appareil s'arrêtera de fonctionner automatiquement après 10 minutes. Si vous souhaitez répéter la procédure, rallumez l'appareil et recommencez.
- 11) Suggestion : au début, commencez par utiliser l'appareil pas plus de 15 minutes et augmentez le temps progressivement à chaque fois, pour atteindre au maximum 30 minutes d'application.
- 12) Après avoir fini la thérapie, ajustez le bouton de sélection sur la partie « No mode », et ajustez le bouton d'intensité sur 0.

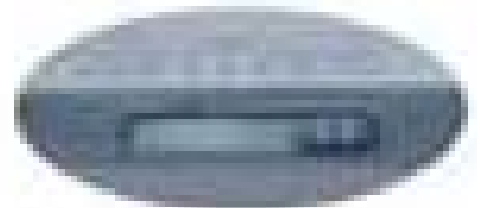


Procédure d'utilisation des différents modes

MODE DE PERCUSSION :

1. déplacez le bouton de sélection de mode sur la partie supérieure, le mode est PERCUSSION.

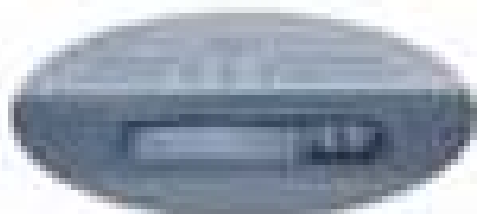

- Bouton de sélection du mode de massage dont EMS (le gauche)

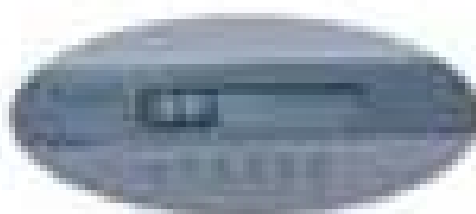

- Bouton de sélection d'intensité (le droit)

2. Déplacez le bouton de la sélection de l'intensité en fonction de vos désirs sur le 1-2-3-4-5.

3) Connectez le plot de contact

4) Chaque thérapie dure 10 minutes, il n'est pas conseillé de dépasser les 30 minutes par jour.

5) le choix de l'intensité est choisi en fonction de votre confort, la plus forte intensité est recommandée.

6) Après le soin, changez le mode ou arrêtez la machine.


(PS : La procédure d'utilisation de chaque mode s'avère la même pour tous.)

Les points recommandés pour l'utilisation de l'EMS, points d'acupuncture chinois.

1) Quand vous utilisez le mode de percussion, les points recommandés sont :


RAFERMISSEMENT DU VENTRE

1. MONTAIGNE (100)
2. MONTAIGNE (100)
3. MONTAIGNE (100)
4. MONTAIGNE (100)

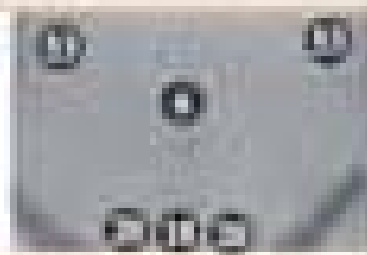

RAFERMISSEMENT DU FESSIER

1. MONTAIGNE (100)
2. MONTAIGNE (100)

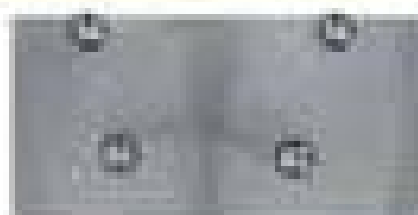

2) Quand vous utilisez le mode de massage, les points recommandés sont :

BEAUTE DE LA TAILLE	1. JIANGBU (100) 2. TAIXI (75) 3. QIANGMAI (175) 4. SHENYU (185)		
--------------------------------	---	--	--

3) Quand vous utilisez le mode de malaxation, les points recommandés sont :

BEAUTE DU VENTRE	1. QIANGYUAN (180) 2. QIANGSHANGYU (180) 3. QIANGXIYUAN (180)	
-----------------------------	---	--

4) Quand vous utilisez la fonction de grattage, les points recommandés sont :

BEAUTE DE LA PEAU	1. SHENYU (185) 2. QIANGYU (180) 3. SHENSHU (185)		
------------------------------	---	--	--

5) Quand vous utilisez la fonction d'amincissement, les points recommandés sont :

REDUCTION DU POIDS	1. DIAZHU (125) 2. YANGSHUAN (185) 3. ZHONGYUAN (180) 4. QIANGYUAN (180) 5. JIJIAO (125) 6. SHENYU (185) 7. CHENGQU (185)		
-------------------------------	---	--	--

UTILISATION DU MODE INFRAROUGE

Quand vous utilisez l'infrarouge lointain, il est obligatoire d'appliquer le produit de soin sur votre peau. Il est non seulement considéré comme un moyen de conduction, mais aussi comme un élément important qui offre à votre peau la nutrition dont elle a besoin. Par conséquent, il est toujours obligatoire d'appliquer le produit de soin de la peau avant d'utiliser ce mode.

Etape 1 :

Branchez l'alimentation.

Etape 2 :

Allumez l'appareil et la lumière rouge s'allume.

Etape 3 :

Appuyez sur le bouton infrarouge. (INFRARED)

Etape 4 :

Quand la lumière rouge est émise de la tête de l'appareil, cela signifie que l'énergie de l'infrarouge commence déjà à fonctionner.

Etape 5 :

Pointez l'infrarouge sur la partie de votre corps que vous souhaitez et l'énergie sera envoyée vers votre peau.

APRES UTILISATION :

- 1. Veuillez vérifier que tous les boutons sont éteints.**
- 2. Eteignez l'appareil.**
- 3. Placez les électrodes.**
- 4. Nettoyez la tête de la machine, et les électrodes avec un chiffon humide.**
- 5. veuillez ne pas utiliser de diluant, d'essence ni de liquide volatile pour nettoyer la machine.**
- 6. Rangez l'appareil dans sa boîte.**