



Pure Skin - shebuel.com

Veillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil.


Ce manuel a été traduit de l'anglais.

Introduction

Les ingrédients principaux de la crème de soin pour la peau sont des molécules organiques. Si la peau ne peut pas être nettoyée en profondeur, la nutrition est difficile à absorber par la peau. Ainsi, la nutrition ne peut pas entrer dans la peau, même la meilleure crème de soins de la peau ne peut pas montrer une bonne efficacité. "Commencez par vous laver le visage, et finissez par vous laver le visage." Pour la peau, le lavage est très important, mais les impuretés dans les pores et le sébum sont si difficiles à nettoyer avec du savon normal. Une fois que nos pores sont obstrués par une substance sale, notre peau devient foncée et rugueuse.

Il s'agit d'un appareil de nettoyage de la peau de type scrubber appareil de beauté de nettoyage de la peau. Il s'agit d'un massage en profondeur par vibration à haute fréquence, faire le mouvement rapide et améliorer la microcirculation, brûler et décomposer les cellules grasses, puis transformé en métabolites pour excréter, de sorte que peut atteindre le nettoyage en profondeur effet. En utilisant une sonde spéciale de lavage à ultrasons 25KHz, qui peut pénétrer profondément dans la peau autour de 3-7mm, Ultrasonic peut rendre le liquide de nettoyage plus petit et atomisant, émulsifiant également la saleté dans les pores et le sébum, enlever complètement les salissures ensemble. Cette méthode de nettoyage est très rapide et efficace.


Garder la peau et l'applicateur pendant 45 degrés, cette méthode d'opération peut accélérer le taux de métabolisme de la peau, de sorte que le vieillissement et les cellules de variation irrégulières ont été effacés. Adoucit la cornée de la peau, réarrange les cellules de l'épiderme, ce qui peut restaurer l'élasticité de la peau, et rend la peau plus ferme et plus lisse.

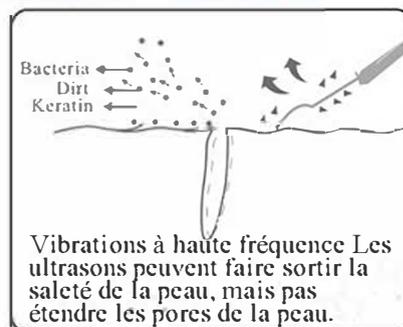

Veillez noter la direction de la sonde : le côté incurvé est tourné vers la peau.

2. import de la nutrition , activation de la peau

L'utilisation des vibrations ultrasoniques et du principe de chaleur favorise la circulation sanguine, accélère le drainage lymphatique. Extraire les toxines et éliminer les cellules vieillissantes, éviter l'accumulation excessive de cellules de la couche cornée. L'échographie peut faire la peau absorber l'eau rapidement, et d'améliorer la perméabilité des cellules, hydrater la peau, la peau peut pleinement y absorber les nutriments, changer et améliorer le teint de la peau, enlever la peau sombre et éclaircir la peau.

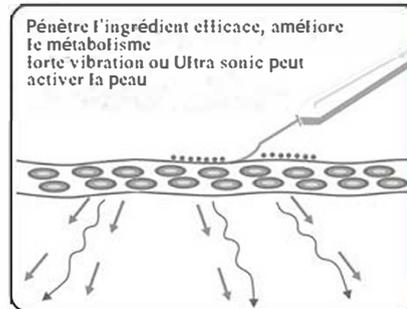

Veillez noter que la direction de la sonde doit être opposée en tant que méthode de nettoyage

3. Massage de tapotement, élimine les rides.

Avec l'augmentation de l'âge, la fonction physiologique du corps a diminué, le métabolisme cellulaire ralentit et la période de renouvellement de la peau sera prolongée. Cet appareil peut aider à restaurer l'élasticité de la peau et à éliminer les rides.

Une cuticule trop épaisse, une crème de soin ou un liquide trop épais n'était pas facile à pénétrer et à absorber.




Sous l'action des ultrasons, la peau est blanche et tendre.



Principe

Cet appareil utilise une vibration ultrasonique de 25 KHz avec la nanotechnologie, cette vibration peut pénétrer dans la peau autour de 3–7mm, faire augmenter la température de la peau, améliorer le métabolisme cellulaire, accélérer la microcirculation et faire le reflux du métabolisme. En convertissant le Ton, augmentant la perméabilité de la membrane, l'acide gras mute en CO₂ et H₂O, le volume des cellules grassieuses devient plus petit. Si vous l'assortissez à la crème de soin ou au liquide liquid, il sera plus efficace pour la beauté du visage.

Nomenclature

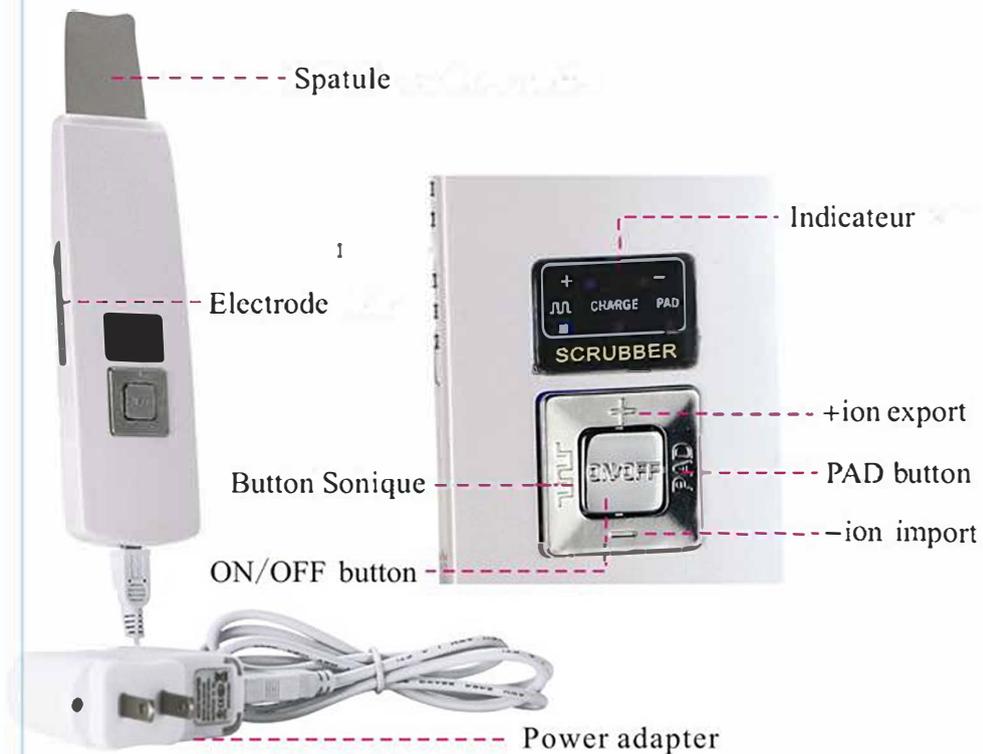

Appuyez sur le bouton Sonic, laissez tomber de l'eau sur la sonde, vous verrez l'eau devenir du brouillard immédiatement. Il est donc prouvé à quel point les ultrasons sont efficaces.



Usage

1. Avant la première utilisation de cet appareil, veuillez recharger complètement l'appareil, environ 2 heures.
2. Nettoyer le visage, garder l'hydratation du visage.
3. Appuyez sur le bouton ON, la fonction sonique commence à fonctionner, puis appuyez sur “+” (+ Ion), vous pouvez commencer le nettoyage.
4. Si vous voulez importer la nutrition pour la peau, s'il vous plaît choisir Sonic et “-” (-Ion) fonction, et garder la direction côté opposé à la peau.
5. L'utilisation de la fonction “PAD” permet de resserrer et de raffermir la peau.
6. Après utilisation, appuyez sur la touche “OFF” et rangez l'appareil en lieu sûr.



Nettoyage Visage



Nettoyage front et menton



Nettoyage nez



Supprime les cernes

Astuces

- A. A. Veuillez désinfecter la sonde et la garder propre avant d'utiliser l'appareil.
- B. B. Nettoyage du visage : utiliser Ultrasonic et "+" (+.on) ; importer Nutrition for. Peau : utiliser Ultrasonic et "-" (-.on) ; Massage et enlever les rides : utiliser PAD Fonction.
- C. C. Rappelez-vous que cet appareil doit être assorti à la crème de soin de la peau ou le liquide ne peut pas seulement utiliser l'appareil à l'état sec. Le temps d'utilisation est 10 minutes par temps.
- D. D. Une fois l'utilisation terminée, essuyez la sonde avec un chiffon sec et désinfectez-la à l'acbo.

F- Type rechargeable, rechargeable, charge environ 2 heures, peut continuer à l'utiliser environ des heures.

F. Fonction d'arrêt automatique après 10 minutes.

Comparaison à un nettoyage classique

Nom	Effet	Effets secondaires
Crème	Uniquement la surface de la peau	Pas de nettoyage en profondeur
Aspiration	Profondeur	Elargit les pores
Pure Skin	Profondeur sans abîmer la peau	Pas d'effets secondaires négatifs

Avertissement

1. Ne pas utiliser cet appareil en cas de blessures de la peau
2. Les enfants et les femmes enceintes ne peuvent pas utiliser cet appareil.
3. Cet appareil aura un faible niveau de bruit en raison des vibrations ultrasoniques, c'est un phénomène normal.
4. N'utilisez pas de câble d'alimentation endommagé et enrroulez le cordon d'alimentation autour de l'appareil lorsque vous le rangez, sous peine de déformer le cordon et de provoquer une panne de l'appareil.
5. N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées,
6. N'utilisez pas de liquide comique pour nettoyer l'appareil.
7. Ne pas stocker l'appareil à une température inférieure à 0°C et supérieure à 60°C, conserver l'appareil à l'abri de la lumière du soleil.

Caractéristiques

Nom: Pure Skin

Entrée: AC100 - 240V / 50Hz –60Hz

Sortie: DC5V 1A

Puissance: 5W

Poids: 84.2g

Dimensions: 170 x44 x 18mm

Dimensions de la boîte: 220 x 158 x 58mm