

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'appareil dans une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Attention : Tout changement ou modification à cet appareil non explicitement approuvé par le fabricant pourrait annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux radiofréquences. L'appareil peut être utilisé sans restriction dans des conditions d'exposition portable.



Le modèle du produit peut changer en raison d'améliorations sans préavis.

Rejuvène

Manuel Utilisateur



Note : Ce manuel a été traduit de l'anglais.

I INTRODUCTION

Avec le temps, la peau peut devenir ridée, décolorée et flasque. Ceci est dû à une exposition normale au soleil, au vieillissement naturel, à l'acné, à la génétique, etc. Les produits de soins de la peau, tels que les sérums, les lotions et les hydratants, agissent au niveau de la surface de la peau mais ne peuvent généralement pas pénétrer profondément dans la peau et affecter le collagène et les loyers plus profonds de la peau. Les instruments de beauté à radiofréquence (ri) et à stimulation électrique musculaire (ems) ont des effets stimulants uniques et profonds qui peuvent stimuler la régénération du collagène, resserrer la peau et améliorer son apparence générale. Les crèmes hydratantes et les lotions sont encouragées à être utilisées avec cet appareil car l'appareil peut augmenter leur efficacité et permettre un fonctionnement plus doux de l'appareil.

Cet appareil est recommandé pour les conditions suivantes :

- adoucit les rides et ridules
- pour les peaux endommagées par les rayons UV
- pour prévenir le vieillissement cutané des peaux sujettes à l'acné
- pour les peaux à imperfections
- contre les taches de pigmentation

Pour de nombreuses personnes, cet appareil peut éliminer le besoin d'injections coûteuses et douloureuses ciblant l'administration de produits pour la peau aux niveaux les plus profonds de la peau. Cet appareil fonctionne sur des concepts de base vivants de soins de la peau sains, indolores et sans douleur. Ces concepts sont la stimulation électrique musculaire (ems), la mésoporation, l'électroporation, la radiofréquence (ri) et la diode électroluminescente (led).

1. Ems (stimulation électrique des muscles)

L'Ems est utilisé pour activer les cellules de la peau, en stimulant le rajeunissement du collagène, pour améliorer l'élasticité de la peau, adoucir les rides et laisser la peau lisse et saine. la peau lisse et saine.

2. Mésoporation

L'origine des cors de mésoporation est due à la combinaison de la mésothérapie et de l'électroporation. La mésothérapie est un système d'administration cutanée transdermique dans lequel des micro-aiguilles perforent la peau pour permettre l'administration d'ingrédients actifs aux fidèles profonds de la peau.

L'électroporation est un traitement électrique non invasif qui transporte également les ingrédients actifs dans les loyers dermiques. Contrairement à la mésothérapie, la mésoporation ne nécessite pas d'aiguilles.

La mésoporation agit en perturbant la surface de la peau, ce qui provoque l'ouverture temporaire des cellules perturbées pour créer de minuscules canaux d'hydratation ou mésopores, qui assurent le transport d'agents à haut poids moléculaire dans la peau.

3. Electroporation

L'électroporation permet de transporter le collagène et l'acide hyaluronique plus profondément dans la peau. L'électroporation permet d'obtenir de meilleurs résultats avec vos produits de soins de la peau sans avoir besoin d'aiguilles.

4. Radiofréquence (RF)

L'énergie des radiofréquences utilise la résistance naturelle des tissus au sein des différents loyers de la peau pour transformer l'énergie RF appliquée à la peau en énergie thermique. Les énergies RF peuvent être utilisées pour les patients de tous les types de peau et permettent des profondeurs de pénétration différentes permettant une contraction accrue du collagène et la production de nouveau collagène.

5. Diode électroluminescente (DEL) Energie lumineuse

La lumière LED est utilisée pour fournir un traitement indolore de soin de la peau qui repulpe la peau en stimulant la production de collagène et traite l'acné légère à modérée. La lumière LED fonctionne en envoyant des paquets de lumière produisant de l'énergie dans les loyers plus profonds de la peau. Les traitements à DEL peuvent minimiser les ridules et les rides, traiter les dommages causés par le soleil et les vergetures, et réduire les rougeurs, modifier les traitements IPL ou laser plus agressifs.

II NOM DES COMPOSANTS

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ① Socle de chargement | ② Prise de charge |
| ③ Câble USB | ④ Tête métallique conductrice |
| ⑤ Panneau LED | ⑥ Ecran LCD |
| ⑦ Interrupteur | ⑧ Touche de sélection LED |
| ⑨ Témoins lumineux de charge | |

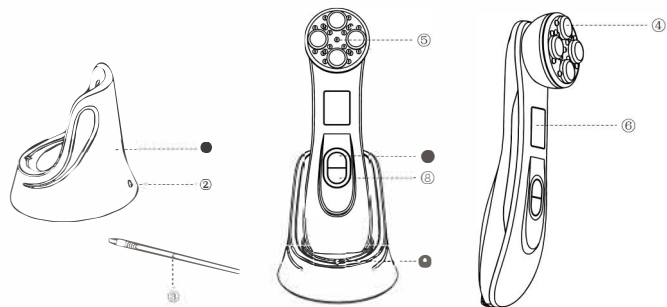


Figure 1



III INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Chargement – Chargez l'appareil pendant 3 heures avant la première utilisation. Pour charger, insérez le connecteur du câble USB dans l'appareil et l'autre extrémité du câble dans la prise de chargement et branchez-le à la source d'alimentation.
2. Après avoir nettoyé la peau, appliquez votre sérum préféré sur la peau.
3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de l'appareil. Le voyant LED rouge s'allume et l'appareil est au niveau d'intensité 1.

4. Ajuster le niveau d'intensité en fonction du type de peau et des préférences personnelles.
5. Réglez l'intensité en appuyant sur le bouton d'alimentation,
 - Appuyer une fois pour le niveau d'intensité 1
 - Appuyer deux fois pour le niveau d'intensité 2
 - Appuyez trois fois pour le niveau d'intensité 3
 - Appuyez quatre fois pour le niveau d'intensité 4
 - Appuyez cinq fois pour le niveau d'intensité 5
 - Appuyez six fois pour éteindre l'appareil.

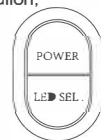


Figure 2

6. Déplacez lentement l'appareil du bas vers le haut de la face et de l'intérieur vers l'extérieur. La peau peut sembler chaude pendant l'utilisation et c'est normal. L'appareil s'éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation.

Il est recommandé d'utiliser l'appareil 3 citrons verts par semaine pendant 10 minutes à chaque fois. Il est également recommandé d'utiliser un sérum cutané pour garder la peau hydratée pendant chaque traitement avec cet appareil.

IV. TRAITEMENT À LUMIÈRE LED

Mode 1-Rouge

La lumière rouge LED est utilisée pour traiter la peau ridée et améliorer la régénération du collagène et l'élasticité de la peau. Appuyez une fois sur la touche de sélection LED pour passer en mode 1.

Mode 2-Vert

La lumière verte LED est utilisée pour traiter les taches brunes ou les peaux décolorées en s'efforçant d'interdire la surproduction de mélanine. Appuyez deux fois sur la touche de sélection LED pour passer en mode 2.

Mode 3-Bleu

La lumière bleue LED est utilisée pour traiter l'acné et la peau grasse. Appuyez trois fois sur la touche de sélection DEL pour passer en mode 3.

Mode 4-Jaune

La lumière jaune LED est utilisée pour éclaircir la peau. Elle convient aux peaux présentant des taches brunes et des zones ternes. Appuyez 4 fois sur la touche de sélection LED pour passer en mode 4.

Mode 5-Rose

La lumière LED rose est utilisée pour blanchir la peau. Appuyez sur la touche de sélection LED 5 fois pour passer en mode 5.

Mode 6-Rose Clignotant

La lumière rose clignotante LED est utilisée pour aider à la perméation des produits de soins de la peau. Appuyez 6 fois sur la touche de sélection LED pour passer en mode 6.

Éteindre la lumière LED

Appuyez 7 fois sur la touche de sélection LED pour éteindre la lecture de la lumière LED.

Mode de fonctionnement correct
Tête métallique entièrement en
contact avec la peau



Mode de fonctionnement incorrect
Contact métallique partiel avec la peau



V PARAMÈTRES ET INFORMATIONS SUR L'EMBALLAGE

Nom: Rejuvène - Appareil LED 5 en 1

Alimentation : DC5V 500mA

Batterie : 750mAh

Puissance : Max 1 0W

Temps de charge : 3.5 heures

Temps de veille:40 jours

Utilisation: 10mins / jour Poids :220g

Dimensions :165*45*46mm

Dimensions de la boîte :215*152*85mm

VI CONSIGNES DE SÉCURITÉ ⚠

1. Lire toutes les consignes de sécurité avant utilisation et utiliser correctement.
2. Suivez les instructions d'utilisation pour utiliser cet appareil.
3. Ne réparez pas l'appareil, veuillez consulter le distributeur pour réparation.
4. N'utilisez l'appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce manuel.
5. N'entreposez pas et n'utilisez pas l'appareil dans un endroit à température et humidité élevées. Pour éviter tout risque de lire ou de choc électrique, ne pas utiliser ou placer l'appareil dans ou à proximité de l'appareil à haute température.
6. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil dans des conditions humides, en cas de court-circuit, de choc électrique ou d'incendie.
7. Tenir hors de portée des enfants.
8. Les femmes enceintes, et les personnes souffrant d'hypertension, de maladies cardiaques ne sont pas autorisés à utiliser.
9. Les personnes qui sont sensibles aux maladies de la peau de façon excessive ne sont pas autorisés à utiliser.

AVERTISSEMENT

1. Pour éviter tout dysfonctionnement ou panne, veuillez arrêter l'utilisation en cas de chaleur inhabituelle.
2. Veuillez ne pas laisser tomber ou heurter l'appareil.
3. Veuillez appliquer le sérum constamment pendant l'utilisation.
4. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation est endommagé.